

ГОСТ Р 50351.1—92

(ИСО 3630—1—90)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ИНСТРУМЕНТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ КАНАЛА
КОРНЯ ЗУБА**

**Часть 1. КОРНЕВЫЕ НАПИЛЬНИКИ, ДРИЛЬБОРЫ,
ПУЛЬПОЭКСТРАКТОРЫ, РАШПИЛИ, КАНАЛОНАПОЛНИТЕ-
ЛИ, ЗОНДЫ И ВАТНЫЕ ИГЛЫ**

Издание официальное



ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**ИНСТРУМЕНТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ КАНАЛА КОРНЯ ЗУБА**

**Часть 1. Корневые напильники, дрильборы,
пульпоякстракторы, рашиплии, каналонаполнители,
зонды и ватные иглы**

Dental root-canal instruments.
Part 1 Files, teamers, barbed broaches, rasps,
pastes carriers, explorers and cotton broaches

ОКП 94 3377, 94 3442, 94 3914, 94 3211

ГОСТ Р**50351.1—92****(ИСО 3630—1—90)****Дата введение 01.01.94****0. ВВЕДЕНИЕ**

В настоящем стандарте рассматриваются важнейшие характеристики ручных и машинных стоматологических инструментов для лечения и обработки канала корня зуба, используемых стоматологами при механической подготовке каналов к лечению. В стоматологии такие инструменты относят также к эндодонтическим.


В дополнение к указанным конкретным типам инструментов в настоящий стандарт включены общие технические требования и методы испытаний, применяемые для всех типов инструментов для лечения и обработки канала корня зуба.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

Таблица 6

Размеры, мм

Обозначение исследованного размера	d_1	d_2	d_3	Размеры, мм		t_1 $\pm 0,5$	t_2	Высота зубцов в рабочем положении	Ширина зубца в рабочем положении	Обозначение	
				Исполн. номинал.	Исполн. стали	Номин.	Линейн.	Мод. откл.			
020	0,12		0,22			0,15			0,075	Фиолето- вой	0
025	0,14	$\pm 0,02$	0,24	$+0,02$	0,17	$\pm 0,02$			0,085	Белый	1
030	0,16		0,26			0,19			0,095	Желтый	2
035	0,18	$\pm 0,03$	0,28	$+0,03$	0,21	$\pm 0,03$	10,5	20	36	Красный	3
040	0,21		0,31			0,24			0,120	Голубой	4
050	0,25	$\pm 0,04$	0,35	$\pm 0,04$	0,28	$\pm 0,04$			0,140	Зеленый	5
060	0,29		0,39			0,32			0,160	Черный	6

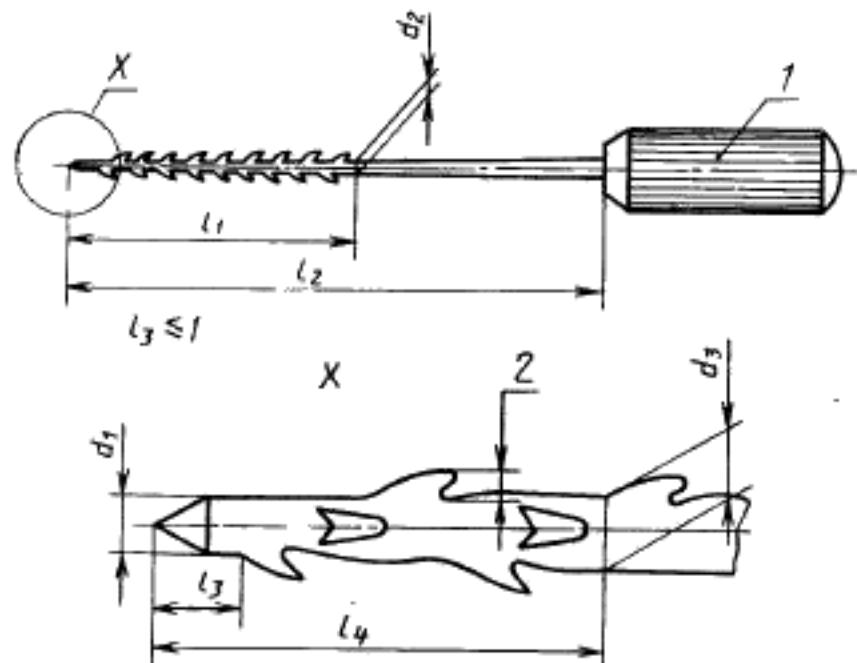*1 — ручка; 2 — высота зубца;*

*d₁ — начальный диаметр рабочей части; d₂ — диаметр на длине 10,5 мм от заходной части;
d₃ — диаметр стержня по длине l₄; l₁ — длина рабочей части; l₂ — длина оперативной части;
l₃ — длина заходной части от острия до основания первого зубца l₄ — длина до точки изме-
рения*


Конусность по длине рабочей части 0,015:1 с допуском $\pm 0,005$

Черт. 6

Таблица 7

Размеры, мм

Обозначение номи- нального размера	d_1	d_2	d_3	l_1	l_2	l_4	Высота зубца	Число зубцов в м	Обозначение	
	+0,03	+0,01	+0,01	$\pm 1,5$	$\pm 0,5$				Цвет	Ширина
025	0,16	0,31	0,20				0,05		Белый	1
030	0,18	0,34	0,23				0,06		Желтый	2
035	0,21	0,37	0,26				0,07	50	Красный	3
040	0,24	0,40	0,29	10,5	25,5	3	0,08		Голубой	4
045	0,27	0,43	0,32				0,09		Зеленый	5
050	0,30	0,46	0,35				0,10		Черный	6

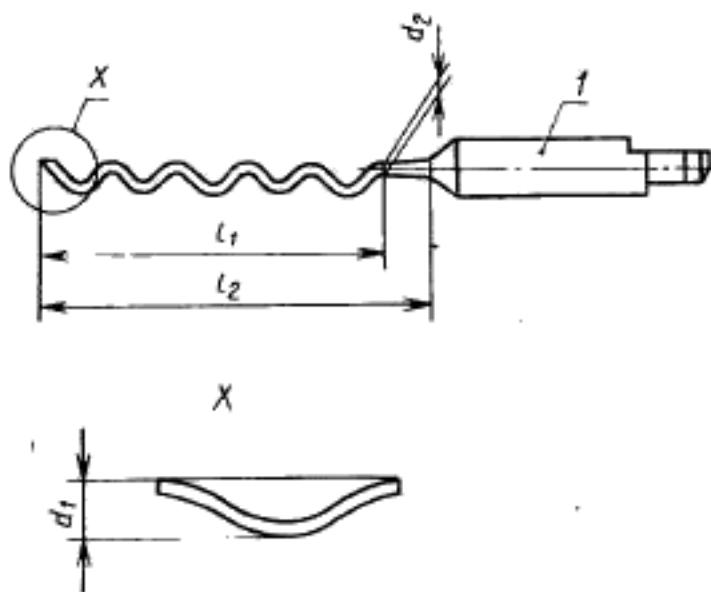

d_1 — начальный диаметр рабочей части; d_2 — максимальный диаметр рабочей части; l_1 — длина рабочей части; l_2 — длина оперативной части

Конусность по длине рабочей части от 0,00 до 0,02:1

Черт. 7

Таблица 8

Размеры, мм

Обозначение номинального размера	d_1 $\pm 0,05$	l_1 , мм	Обозначение	
			Цвет	Кольцевая маркировка хвостовика
025	0,25		Красный	I
030	0,30		Голубой	II
035	0,35	16	Зеленый	III
040	0,40		Черный	IV


Таблица 8а

Длина l_2 для хвостовика

мм

l_2
 $\pm 0,5$

типа I	типа 2
21	21
25	25
29	—

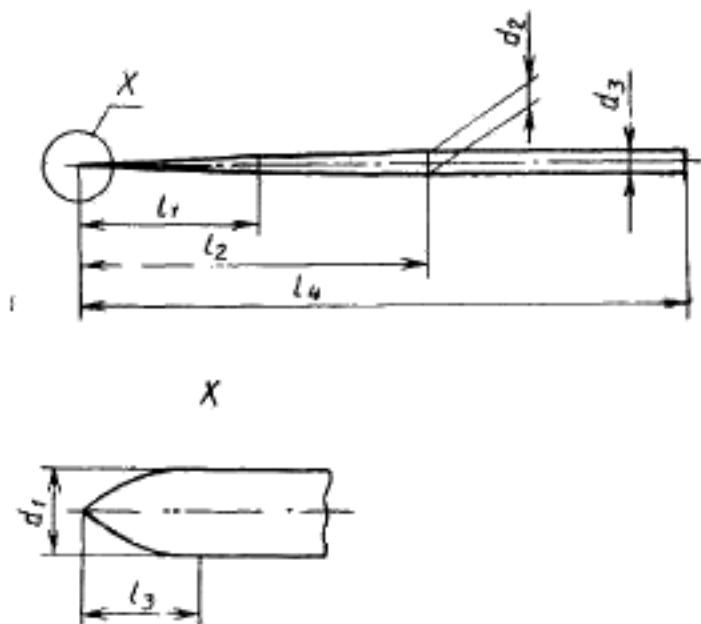

d_1 — начальный диаметр рабочей части; d_2 — диаметр на конце оперативной части; d_3 — диаметр ручки; l_1 — длина рабочей части; l_2 — длина оперативной части; l_3 — длина заходной части; l_4 — общая длина

Конусность по длине оперативной части 0,007:1 с допуском $+0,003$

Черт. 8

Таблица 9*

Обозначение номинального размера	Размеры, мм						Обозначение	
	d_1 $\pm 0,02$	d_2 макс	l_1 $\pm 1,5$	l_2 $\pm 0,5$	l_3 макс	l_4 $\pm 1,5$	Цвет	Номер
012	0,12						Белый	1
015	0,16						Желтый	2
017	0,17						Красный	3
020	0,20	0,8	10,5	25	$2 \times d_4$	50	Голубой	4
025	0,25						Зеленый	5
030	0,30						Черный	6

* См. приложение.

рументы с хвостовиками 1-го или 2-го типа должны применяться с такими наконечниками или устройствами, работа которых ограничена низкой скоростью и которые выполняют описывающее и (или) возвратно-поступательное движение (при отсутствии других указаний).

4.2.2. Корневые напильники

4.2.2.1. Корневые напильники типа Н

Форма заходной части и конструкция ручки или хвостовика (типа 1 или 2 по ГОСТ 26634) — по усмотрению изготовителя.

4.2.2.2. Корневые напильники типа К

Форма заходной части и конструкция ручки или хвостовика (типа 1 или 2 по ГОСТ 26634) — по усмотрению изготовителя.

4.2.3. Дрильборы

4.2.3.1. Дрильборы типа К

Форма заходной части и конструкция ручки или хвостовика (типа 1 или 2 по ГОСТ 26634) — по выбору изготовителя.

4.2.3.2. Дрильборы типа В2

Хвостовик типа 1 или 2 по ГОСТ 26634 — по усмотрению изготовителя.

4.2.4. Пульзоэкстракторы

Форма заходной части — по усмотрению изготовителя.

При ручном применении конструкция ручки — по усмотрению изготовителя.

При машинном применении (только для наконечника с возвратно-поступательным движением) — хвостовик типа 1 по ГОСТ 26634.

4.2.5. Рашили

Форма заходной части и конструкция ручки — по усмотрению изготовителя.

4.2.6. Каналонаполнители

Хвостовик типа 1 или 2 по ГОСТ 26634 — по усмотрению изготовителя.

Намотка спирали — по усмотрению изготовителя. Намотка спирали должна быть выполнена таким образом, чтобы при вращении по часовой стрелке подавался материал на заходную часть.

4.2.7. Зонды и ватные иглы

Сечение оперативной части круглое или многоугольное — по выбору изготовителя.

4.3. Механические требования

4.3.1. Сопротивление излому при кручении и угловое отклонение

4.3.1.1. Корневые напильники, дрильборы, пульзоэкстракторы и рашили при эксплуатации не должны ломаться. Должны быть достигнуты минимальные значения сопротивления излому при кручении и углового отклонения, указанные в табл. 10.

Таблица 10

Обозначение номинального размера	Сопротивление излому (при кручении) Г-см, тыс				Угловое отклонение, градусы, мин			
	Коренное напильники типа К	Коренное типа Н	Дрельбо- ра- типа К	Гуашко- страктор	Размытие	Коренное напильники в дрельбор- ре типа К	Коренное напильники типа Н	Пулансо- жестякторы
008	5	5	5	5	—	—	—	—
010	6	6	6	6	—	—	—	—
015	8	8	8	8	—	—	—	—
020	18	12	12	12	5	—	180	90
025	30	20	20	20	6	8	360	90
030	45	35	35	35	6	10	—	90
035	65	50	50	50	10	12	—	90
040	100	65	70	70	12	20	—	90
045	120	90	95	—	—	26	120	90
050	170	120	120	20	20	35	—	—
055	11	160	12	—	—	—	—	—
060	11	250	12	35	—	—	90	90
070	11	350	—	—	—	—	—	—

1) Минимальные значения для размеров, превышающих приведенные в таблице, не указаны. Считается, что инструменты большего размера имеют достаточное сопротивление излому и условие отклонение.

Испытание должно быть выполнено по п. 6.3.

Примечание. Для других инструментов, используемых для лечения и обработки канала корня зуба, требования будут сформулированы дополнительно по мере накопления данных.

4.3.2. Сопротивление изгибу

4.3.2.1. Корневые напильники, дрильбормы, пульврэкстракторы и рашпили

Значения сопротивления изгибу не должны быть выше указанных в табл. 11.

Таблица 11

Сопротивление изгибу

Обозначение максимального размера	Изгибающий момент, г·см, макс				
	Корневые напильники		Дрильбормы типа К	Пульврэк- стракторы	Рашпили
	типа К	типа Н			
008	20	20	20	—	—
010	25	20	25	—	—
015	50	35	50	—	—
020	80	65	80	25	—
025	120	100	120	30	50
030	150	135	150	40	70
035	190	170	220	50	90
040	250	220	320	80	140
045	360	320	375	—	170
050	450	520	410	120	210
065		720			—
060	1)	920	1)	170	—
070		1220		—	—

¹⁾ Максимальные значения для размеров, превышающих приведенные в таблице, не указаны. Считается, что инструменты большего размера имеют достаточную гибкость.

Испытание проводят по п. 6.4.

Примечание. Для других инструментов, используемых для лечения и обработки канала корня зуба, требования будут сформулированы дополнительно по мере накопления данных.

4.3.3. Сопротивление натяжению и кручению, надежность крепления ручки или хвостовика

Настоящее требование не распространяется на надежность крепления спиральных каналонаполнителей.

Крепление ручки или хвостовика с оперативной частью должно быть надежным и безопасным. Не должно быть какого-либо осевого перемещения инструмента относительно ручки или хвостовика и их скручивания при кручении.

Испытание проводят по п. 6.5.

4.4. Химические требования

4.4.1. Сопротивление коррозии

На инструментах, изготовленных из нержавеющей стали, не должно быть никаких признаков коррозии. Инструменты, изготовленные из металла, не прошедшего специальную антикоррозионную обработку, не допускаются к применению.

Испытание проводят по п. 6.6.

4.4.2. Термическое воздействие при стерилизации

На рабочей части инструментов должны отсутствовать какие-либо признаки ухудшения качества. При визуальном осмотре на ручках не должны обнаруживаться деформации или изменение цвета.

Испытание проводят по п. 6.7.

5. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

Отбирают по 10 инструментов каждого типа и размера для установления соответствия:

а) сопротивление излому при кручении и угловое отклонение по п. 4.3.1;

б) сопротивление изгибу по п. 4.3.2.

Способ поставки образцов для испытания следует указать в протоколе испытаний.

Если все десять образцов прошли испытание, продукцию принимают. Если восемь (или менее) образцов прошли испытание, продукцию забраковывают. Если испытание прошли девять образцов, то дополнительно испытывают еще пять образцов.

При испытании пяти дополнительных образцов все пять должны пройти испытание для того, чтобы продукция была принята.

Для проверки других требований отбор образцов указан в соответствующих пунктах по испытаниям.

6. ИСПЫТАНИЯ

6.1. Визуальный осмотр

Для проверки соответствия установленным требованиям проводят визуальный осмотр при нормальной остроте зрения (если нет других указаний).

6.2. Измерения размеров

Длины, диаметры и конусность измеряют или рассчитывают с помощью проекционного прибора или другого оборудования эквивалентной точности, например измерительного прибора с круговой шкалой.

Конусность определяют путем расчета, используя действительные значения измеренных диаметров d_2 и d_3 или d_1 и d_2 .

Конусность — разность между d_2 и d_3 или d_1 и d_2 деленная на длину конуса. Допуск по конусу проверяют исключительно с помощью допусков на указанные диаметры.

Размер заходной части рассчитывают из проекции конуса рабочей части на плоскость заходной части инструмента (базис), перпендикулярную к продольной оси (центральная линия) инструмента.

6.3. Сопротивление излому при кручении и угловое отклонение

6.3.1. Испытательная аппаратура

При испытании используют следующую аппаратуру:

а) низкоскоростной реверсивный редукторный двигатель, в котором поворот испытуемого образца происходит с интервалом 2 мин^{-1} ;

б) устройство для измерения крутящего момента, установленное на двух линейных шариковых направляющих;

в) патрон с тисками из мягкой латуни (70 % меди и 30 % цинка) для зажима конца испытуемого образца на длину 3 мм coaxialno с осью кручения;

г) раздельный усилитель и цифровой дисплей для регулирования работы двигателя и регистрации крутящего момента и углового отклонения;

д) патрон с тисками из закаленной стали для зажима хвостовика (стержня) испытуемого образца.

6.3.2. Проведение испытания


Ручки с помощью кусачек удаляют в месте их соединения со стержнем инструмента. Устройство для измерения крутящего момента выверяют по диапазону крутящего момента испытуемого образца. В патрон редукторного двигателя устанавливают испытуемый образец, оставляя максимум 1 мм неотшлифованного участка хвостовика (стержня) вне патрона.

Затягивают патрон. Медленно передвигают устройство для измерения крутящего момента вдоль линейных шариковых направляющих, пока конец испытуемого образца не войдет на 3 мм в латунные тиски (черт. 9). Проверяют, чтобы испытуемый образец был расположен прямо и в центре тисков (черт. 10). Затягивают патрон. Зажимание в тиски может вызвать предварительное напряжение испытуемого образца, поэтому необходимо включать редукторный двигатель до тех пор, пока цифровой дисплей или ленточный самописец не покажет ноль.

Удостоверившись в том, что двигатель установлен на вращение по часовой стрелке, если смотреть с торца хвостовика (стержня) испытуемого образца, устройство приводят в действие.

При поломке образца устройство должно прекратить работу. Значение крутящего момента и угловое отклонение записывают для каждого испытуемого образца.


Испытательный патрон

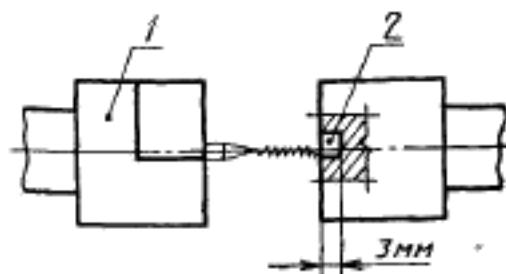

1 — патрон со стальными тисками; 2 — тиски из мягкой латунь

Черт. 9

Аппарат для испытания на кручение

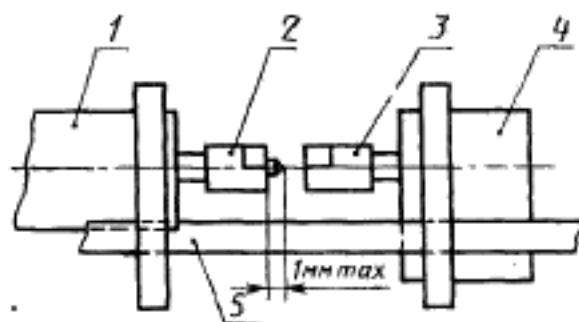

1 — реверсивный реостаторный двигатель; 2 — патрон с тисками из закаленной стали; 3 — патрон с тисками из мягкой латуни; 4 — устройство для измерения крутящего момента; 5 — линейные шариковые направляющие

Черт. 10

6.4 Сопротивление изгибу

6.4.1 Аппаратура

Используют аппаратуру по п. 6.3.1 с модификацией зажимных тисков и изгибающего устройства или стопорного штифта, изображенных на черт. 11. Усилитель должен устанавливаться на предварительно выбранное угловое отклонение 45° , которое является при испытании точкой остановки аппарата.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает требования и методы испытаний для корневых напильников, дрильборов, пульпозэкстракторов, рашпилей, каналонаполнителей, зондов и ватных игл. Кроме того, в нем изложены общие технические требования и методы испытаний, дана информация по цветовому коду и идентификационным символам инструментов для лечения и обработки канала корня зуба всех типов.

Дополнительные требования к инструментам, учитывающие специфику народного хозяйства страны, приведены в приложении.

2. ССЫЛКИ

ГОСТ 26634 (ИСО 1797) «Инструменты стоматологические вращающиеся. Хвостовики».

ГОСТ Р 50350.1 (ИСО 6360—1) «Стоматологические вращающиеся инструменты. Система цифрового обозначения. Часть 1. Общие характеристики».

ГОСТ Р 50350.2 (ИСО 6360—2) «Стоматологические вращающиеся инструменты. Система цифрового обозначения. Часть 2. Форма и виды исполнения».

ГОСТ 7.64 (ИСО 8601) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Представление дат и времени дня. Общие требования».


3. НОМИНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

В табл. 1 приведены номинальные размеры рабочих частей и соответствующие обозначения, которые следует использовать для всех стоматологических инструментов для корневых каналов (независимо от типа инструмента).

Таблица 1

Обозначение номинального размера	Диаметр, мм
008	0,08
010	0,10
012	0,12
015	0,15
017	0,17
020	0,20
025	0,25
030	0,30
035	0,35
040	0,40
045	0,45

Аппарат для испытания на изгиб

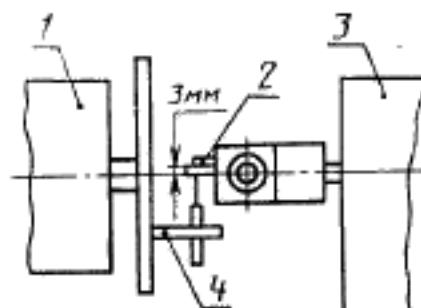

1 — реверсивный редукторный двигатель; 2 — стол; 3 — устройство для измерения крутящего момента; 4 — стопорный штифт

Черт. 11

6.4.2. Проведение испытания

При помощи кусачек удаляют ручки в месте их соединения с стержнем инструмента.

Аппарат устанавливают на остановку при угловом отклонении в 45°.

Патроны устанавливают на выходной вал устройства для измерения крутящего момента. Конец испытуемого образца устанавливают в тиски на глубину 3 мм перпендикулярно к оси редукторного двигателя. Затягивают патрон. Устанавливают стопорный штифт на диске редукторного двигателя. Двигают устройство для измерения крутящего момента вдоль линейных шариковых направляющих до тех пор, пока испытуемый образец не окажется над вращающимся штифтом. Двигатель постепенно поворачивают в нужном направлении до тех пор, пока стопорный штифт не коснется испытуемого образца. Следует убедиться в том, что дисплей показывает ноль. Включают устройство для измерения крутящего момента. При достижении углового отклонения 45° испытание прекращают. Для каждого испытанного образца на дисплее регистрируют испытательную нагрузку.

6.5. Сопротивление натяжению и кручению крепления ручки или хвостовика

Для испытания на натяжение отбирают в качестве образцов по пять инструментов каждого типа и размера; для испытания на кручение отбирают по пять других инструментов каждого типа и размера.

6.5.1. Сопротивление натяжению

Зажимают оперативную часть, оставив снаружи 3 мм стержня.

Ручку или хвостовик фиксируют для предотвращения осевого перемещения без ограничения свободы перемещения вставленного оперативного конца. Максимально прикладывают усилие 2,25 кг.

Измеряют и записывают длину оперативной части для определения наличия какого-либо осевого перемещения.

6.5.2. Сопротивление кручению

Укрепляют ручку или хвостовик в патроне устройства для измерения крутящего момента. Ручка или хвостовик должны быть зажаты вдоль участка за торцем вставленного стержня оперативной части. Вводят оперативную часть инструмента, оставляя снаружи 3 мм хвостовика. Скручивают инструмент при крутящем моменте 360 г·см.

Вращают устройство для измерения крутящего момента до тех пор, пока стержень инструмента не передвинется в пределах ручки или хвостовика, либо до тех пор, пока не будет получен минимальный крутящий момент. Следует отметить, что для стержня диаметром до 0,60 мм стержень может скручиваться до проскальзывания в пределах ручки или хвостовика.

6.6. Сопротивление коррозии

6.6.1. Отбор и подготовка образцов

В качестве образцов для каждого испытания используют пять инструментов каждого размера. Испытуемые образцы моют в воде с мылом, ополаскивают в горячей воде, погружают в 95 %-ный (по объему) этиловый или изопропиловый спирт (изопропанол, пропанол 2) и высушивают.

6.6.2. Проведение испытания

Испытуемые образцы подвергают одному из испытаний, описанных в пп. 6.6.2.1 и 6.6.2.2.

6.6.2.1. Испытание в растворе сернокислой меди

Раствор сернокислой меди приготовляют следующим образом:

4,0 г — пентагидрат сернокислой меди (II) ($CuSO_4 \cdot 5 H_2O$);

10,0 г — серной кислоты (H_2SO_4 1,84 г/мл);

90 мл — воды (H_2O).

Погружают образцы на 6 мин в раствор сернокислой меди температурой $(20 \pm 2)^\circ C$, затем вытирают их ветошью, смоченной в свежей воде. Для обнаружения следов коррозии (коричневые пятна) образцы осматривают при увеличении как минимум 5×.

6.6.2.2. Испытание в агаровом геле

Агаровый гель приготовляют следующим образом:

0,2 г — гексацианоферрита калия (III) [$K_3Fe(CN)_6$];

1,0 г — натрия ($NaCl$);

100 мл — воды (H_2O);

1,5 г — агар-агар;

Агаровый гель наливают в прозрачный контейнер. Испытуемые образцы помещают в гель температурой $(37 \pm 2)^\circ C$ с промежутками между ними не менее 10 мм и на расстоянии 10 мм от края контейнера. Образцы погружают на 6 мин на глубину около 20 мм

и осматривают их для обнаружения коррозии (голубой осадок на поверхности образца), пока они находятся в геле.

6.7. Термовое воздействие при стерилизации

6.7.1. Аппаратура

Паровой автоклав и стерилизаторы-сухожары.

6.7.2. Проведение испытания

10 инструментов каждого размера укладывают в автоклав (используя дистиллированную воду) на 20 мин при давлении 220 кПа (2,2 бар) и температуре (132 ± 5) °С, а затем стерилизуют их в сухожаре при температуре (180 ± 5) °С в течение 120 мин.

7. ОБОЗНАЧЕНИЕ, МАРКИРОВКА И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

7.1. Код для цветового обозначения

Ручка или хвостовики инструментов для лечения и обработки канала корня зуба должны быть обозначены цветами согласно табл. 12 или соответствующими сокращениями, указанными в табл. 13.

Примечание. В основу цветового обозначения положены шесть цветов от белого до черного. Такая последовательность повторяется для инструментов, имеющих больше шести размеров, за исключением тех случаев, когда указано до двух дополнительных размеров. Для этих случаев используют фиолетовый и серый цвета в исходящем порядке.

Из-за различия серий и типов инструментов невозможно вообще использовать один определенный цвет для обозначения какого-то одного диаметра инструмента для лечения и обработки канала корня зуба.

Для обозначения цветов могут быть использованы сокращения, указанные в табл. 13.

Цветовое обозначение

Таблица 12

Обозначение номинального размера	Цветовое обозначение для					
	напильников и дрилльборов типов Н и К	канало- заподлицо- телей	пульпо- экстракторов	рашнелей	дрилльборов типа В2	зондов и натычных игл
008	Серый	—	—	—	—	—
010	Фиолетовый	—	—	—	—	—
012	—	—	—	—	—	Белый
015	Белый	—	—	—	—	Желтый
017	—	—	—	—	—	Красный
020	Желтый	—	Фиолетовый	—	—	Голубой
025	Красный	Красный	Белый	Белый	Фиолетовый	Зеленый
030	Голубой	Голубой	Желтый	Желтый	—	Черный

Продолжение табл. 12

Обозначение номинального размера	Цветовое обозначение для					
	напильников и дрильборов типов Д и К	каналонаполнителей	пудельчиков-стракторов	расчесок	трильборов типа В2	зондов и ватных пал.
035	Зеленый	Зеленый	Красный	Красный	Белый	—
040	Черный	Черный	Голубой	Голубой	—	—
045	Белый	—	—	Зеленый	Желтый	—
050	Желтый	—	Зеленый	Черный	—	—
055	Красный	—	—	—	—	—
060	Голубой	—	Черный	—	Красный	—
070	Зеленый	—	—	—	—	—
075	—	—	—	—	Голубой	—
080	Черный	—	—	—	—	—
090	Белый	—	—	—	Зеленый	—
100	Желтый	—	—	—	—	—
105	—	—	—	—	Черный	—
110	Красный	—	—	—	—	—
120	Голубой	—	—	—	—	—
130	Зеленый	—	—	—	—	—
140	Черный	—	—	—	—	—

Таблица 13
Сокращения для обозначения цветов

Цвет	Сокращение
Серый	grg
Фиолетовый	pur
Белый	wht
Желтый	yel
Красный	red
Голубой	blu
Зеленый	grn
Черный	blk

7.2. Дополнительные обозначения

В соответствии с табл. 14 должны быть использованы дополнительные обозначения:

а) инструменты для лечения и обработки канала корня зуба определенного типа должны быть маркированы кольцами и цифрами согласно табл. 14 в дополнение к цветовому коду по табл. 2—9.

б) для дрильборов типа В2 и каналонаполнителей в табл. 14 дано число колец для соответствующего обозначения номинального размера и конфигурации колец;

Таблица 14

Обозначение номинального размера ¹⁾	Обозначение кольцами и цифрами				
	дрильборов типа В2	пулькоэкстракторов	рашпилей	каналона- полнителей	запилов
012	—	—	—	—	1
015	—	—	—	—	2
017	—	—	—	—	3
020	—	0	—	—	4
025	—	1	—	—	5
030	—	2	—	—	6
035	1	3	—	—	—
040	II	4	—	—	—
045	—	—	5	—	—
050	—	5	—	—	—
060	III	6	—	—	—
075	III I	—	—	—	—
090	III II	—	—	—	—
105	III III	—	—	—	—

¹⁾ Для размеров ниже 100 первую цифру «0» допускается не использовать.

СИМВОЛЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Напильник,
тип Н



Дрильбор,
типа В2



Напильник,
тип К



Пулькоэкст-
ректор



Дрильбор,
типа К



Рашпиль



Дрильбор,
типа В1



Каналона-
полнитель



в) инструменты для лечения и обработки канала корня зуба могут иметь дополнительную маркировку на ручке, обозначающую размер согласно табл. 1, а также идентификационный символ согласно черт. 12.

7.3. Идентификационные символы

Идентификационные символы, используемые на ручке, упаковке, в каталогах изготовителей или стоматологической литературе, должны соответствовать черт. 12.

8. УПАКОВКА

Инструменты для обработки и лечения канала корня зуба поставляют по усмотрению изготовителя в комплекте или отдельными инструментами.

9. МАРКИРОВКА

На каждой упаковке должны быть нанесены следующие сведения:

- а) тип инструмента, обозначение изделия;
- б) длина оперативной части;
- в) номинальный размер инструмента (для размеров менее 100 первая цифра «0» может не использоваться);
- г) наименование изготовителя или поставщика;
- д) дата упаковки (закодированная или в незашифрованном виде);
- е) число инструментов в отдельной упаковке;
- ж) материал оперативной части.

ПРИЛОЖЕНИЕ*

Обязательное

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ СПЕЦИФИКУ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СТРАНЫ**

4.2. Требования к размерам
4.2.2.1. Корневые напильники типа Н

Таблица 2

Обозначение номинального размера	d_1 $\pm 0,025$	d_2 $\pm 0,025$	d_3 $\pm 0,025$	t_1 min	t_2 $\pm 0,5$	t_4	Цветовой код
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------------	-------	--------------

4.2.2.2. Корневые напильники типа К

Таблица 3

Обозначение номинального размера	d_1 $\pm 0,025$	d_2 $+0,025$	d_3 $\pm 0,025$	t_1 min	t_2 $\pm 0,5$	t_4	Цветовой код
--	----------------------	-------------------	----------------------	--------------	--------------------	-------	--------------

4.2.3.1. Дрильборы типа К

Таблица 4

Обозначение номинального размера	d_1 $\pm 0,025$	d_2 $\pm 0,025$	d_3 $\pm 0,025$	t_1 min	t_2 $\pm 0,5$	t_4	Цветовой код
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------------	-------	--------------

4.2.7. Зонды и ватные иглы

Таблица 9

Обозначение номинального размера	d_1 $\pm 0,01$	d_2 max	t_1 $-1,5$	t_2 $\pm 0,5$	t_3 min	t_4 $\pm 1,5$	Обозначение
							Цвет

* До 01.01.96.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. ПОДГОТОВЛЕН** Техническим комитетом по стандартизации ТК 279 «Зубоврачебное дело»
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Госстандарта России от 14.10.92 № 1379
Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 3630/1—90 «Инструменты стоматологические для лечения и обработки канала корня зуба. Часть 1. Корневые напильники, дрильборы, пулькоэкстракторы, рашпили, каналонаполнители, зонды и ватные иглы» с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства
- 3. Срок проверки — 1998 г., периодичность проверки — 5 лет**
- 4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**
- 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение отечественного НТД, за который дана ссылка	Обозначение соответствующего международного стандарта	Номер пункта, раздела
ГОСТ 26634—91	ИСО 1797—85	2; 3; 4.2.2.1; 4.2.2.2; 4.2.3.1; 4.2.3.2; 4.2.4; 4.2.6
ГОСТ Р 50350.1—92	ИСО 6360/1—85	2
ГОСТ Р 50350.2—92	ИСО 6360/2—85	2
ГОСТ 7.64—90	ИСО 8601—88	2; 9

Редактор *В. М. Лысенкова*
 Технический редактор *Г. А. Теребинкина*
 Корректор *О. Я. Чернецова*

Сдано в наб. 24.11.92. Подп. в печ. 14.01.93. Усл. л. л. 1,63. Усл. хр.-отт. 1,63.
 Уч.-изд. л. 1,63. Тираж 194 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Коломенский пер., 14.
 Калужская типография стандартов, ул. Московская, 266. Зак. 2750

Продолжение табл. 1

Обозначение номинального размера	Диаметр, мм
050	0,50
055	0,55
060	0,60
070	0,70
075	0,75
080	0,80
090	0,90
100	1,00
105	1,05
110	1,10
120	1,20
130	1,30
140	1,40
150	1,50
160	1,60
170	1,70
190	1,90

Номинальные размеры обычно соответствуют значениям начального диаметра рабочей части в сотых долях миллиметра.

Обозначение из трех цифр является частью 15-цифрового обозначения, указанного в ГОСТ 50350.1.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Требования к материалу

4.1.1. Рабочая часть

Рабочая часть и стержень, если они составляют одно целое, должны быть изготовлены из нержавеющей или углеродистой стали. Тип стали и способ ее обработки выбирает изготовитель.

4.1.2. Ручка, хвостовик

Ручка и хвостовик, скрепленные со стержнем, должны быть изготовлены из металла или пластика, которые могут выдерживать обычные рабочие процедуры.

Тип материала и способ его обработки выбирает изготовитель.

Требования данного пункта обеспечиваются при выполнении требований пп. 4.2—4.4.


4.2. Требования к размерам

Размеры инструментов должны соответствовать черт. 1—8 и табл. 2—9; при соблюдении требований к размерам допускаются различия по форме и конструкции.

Испытания должны быть выполнены по пп. 6.1 и 6.2.

4.2.1. Хвостовики

По выбору изготовителя хвостовики могут быть 1-го или 2-го типа по ГОСТ 26634. За исключением дрильборов типа В2, инст-

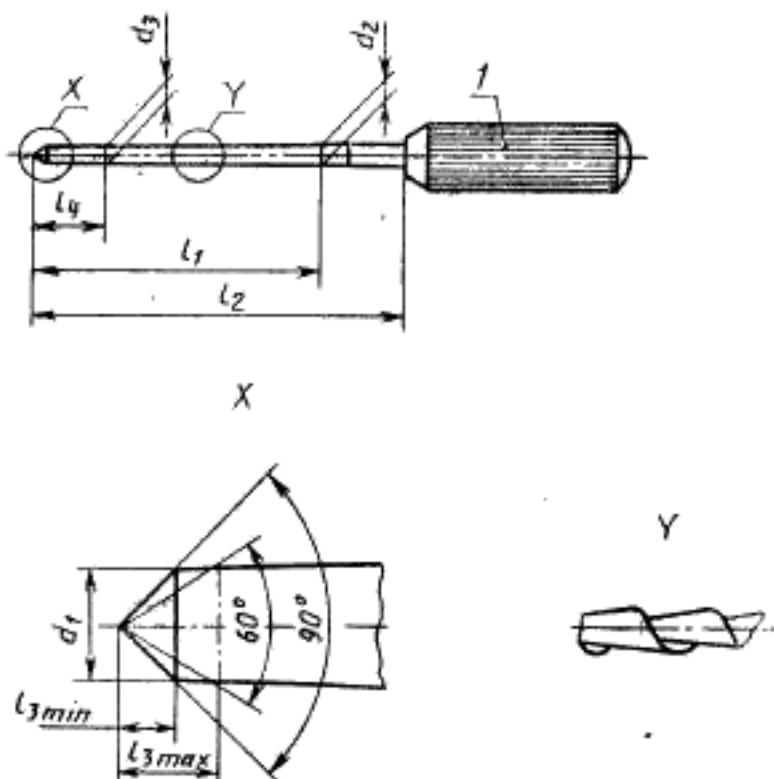

d_1 — начальный диаметр рабочей части; d_2 — максимальный диаметр рабочей части; d_3 — диаметр на длине l_1 ; l_1 — длина рабочей части; l_2 — длина оперативной части; l_3 — длина заходной части; l_4 — длина до точки измерения

Конусность по длине рабочей части 0,02:1

Черт. 1

Таблица 2*


размеры, мм

Обозначение номинального размера	d_1 $\pm 0,02$	d_2 $0,02$	d_3 $-0,02$	l_1 min	l_2 $\pm 0,5$	l_4	Цветовой код
008	0,08	0,40	0,14				Серый
010	0,10	0,42	0,16				Фиолетовый
015	0,15	0,47	0,21				Белый
020	0,20	0,52	0,26	16	25:	3	Желтый
025	0,25	0,57	0,31		28:		Красный
030	0,30	0,62	0,36		31		Голубой
035	0,35	0,67	0,41				Зеленый
040	0,40	0,72	0,46				Черный

Обозначение номинального размера	d_1 ± 0,02	d_2 ± 0,02	d_3 ± 0,02	l_1 мм	l_2 ± 0,5	l_4	Цветовой код
015	0,45	0,77	0,51				Белый
050	0,50	0,82	0,56				Желтый
055	0,55	0,87	0,61				Красный
060	0,60	0,92	0,66				Голубой
070	0,70	1,02	0,76				Зеленый
080	0,80	1,12	0,86		21;		Черный
090	0,90	1,22	0,96	16	25;	3	Белый
					28;		
					31		
100	1,00	1,32	1,06				Желтый
110	1,10	1,42	1,16				Красный
120	1,20	1,52	1,26				Голубой
130	1,30	1,62	1,36				Зеленый
140	1,40	1,72	1,46				Черный

Приложение. Длины инструментов (l_3), не указанные в таблице, должны иметь допуск $\pm 0,5$ мм от установленного значения.

* См. приложение.

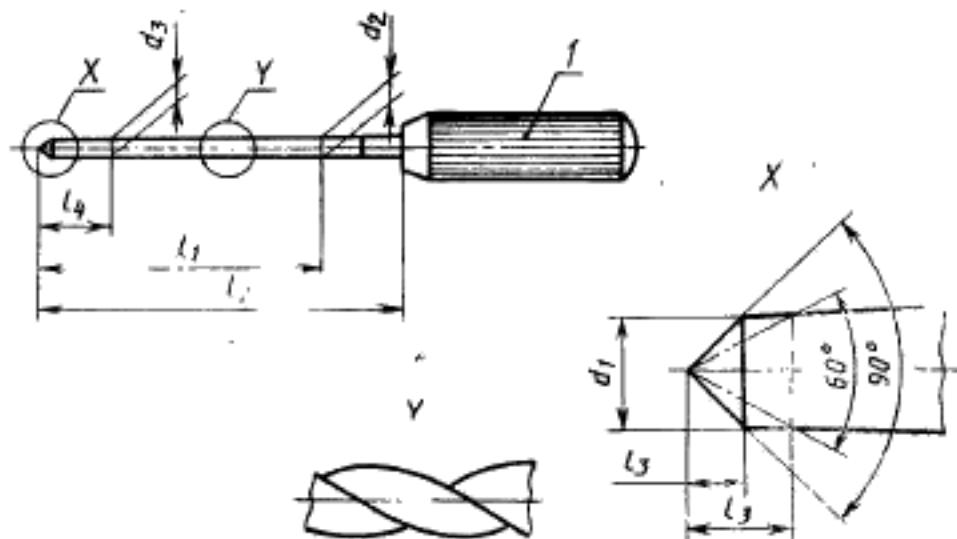

f — ручка;

d_1 — начальный диаметр рабочей части; d_2 — максимальный диаметр рабочей части; d_3 — диаметр по длине l_3 ; l_1 — длина рабочей части; l_2 — длина оперативной части; l_3 — длина заходной части; l_4 — длина до точки измерения

Конусность по длине рабочей части 002:1


Таблица 3*

Размеры, мм

Обозначение номинального размера	d_1 $\pm 0,02$	d_2 $\pm 0,03$	d_3 $\pm 0,02$	t_1 мм	t_2 $\pm 0,5$	t_4	Цветовой код
008	0,08	0,40	0,14				Серый
010	0,10	0,42	0,16				Фиолетовый
015	0,15	0,47	0,21				Белый
020	0,20	0,52	0,26				Желтый
025	0,25	0,57	0,31				Красный
030	0,30	0,62	0,36				Голубой
035	0,35	0,67	0,41				Зеленый
040	0,40	0,72	0,46				Черный
045	0,45	0,77	0,51				Белый
050	0,50	0,82	0,56	16	21;	3	Желтый
055	0,55	0,87	0,61		25,		Красный
060	0,60	0,92	0,66		28;		Голубой
070	0,70	1,02	0,76		31		Зеленый
080	0,80	1,12	0,86				Черный
090	0,90	1,22	0,96				Белый
100	1,00	1,32	1,06				Желтый
110	1,10	1,42	1,16				Красный
120	1,20	1,52	1,26				Голубой
130	1,30	1,62	1,36				Зеленый
140	1,40	1,72	1,46				Черный

Примечание. Длины инструментов (t_2), не указанные в таблице, должны иметь допуск $\pm 0,5$ мм от установленного значения.

* См. приложение.

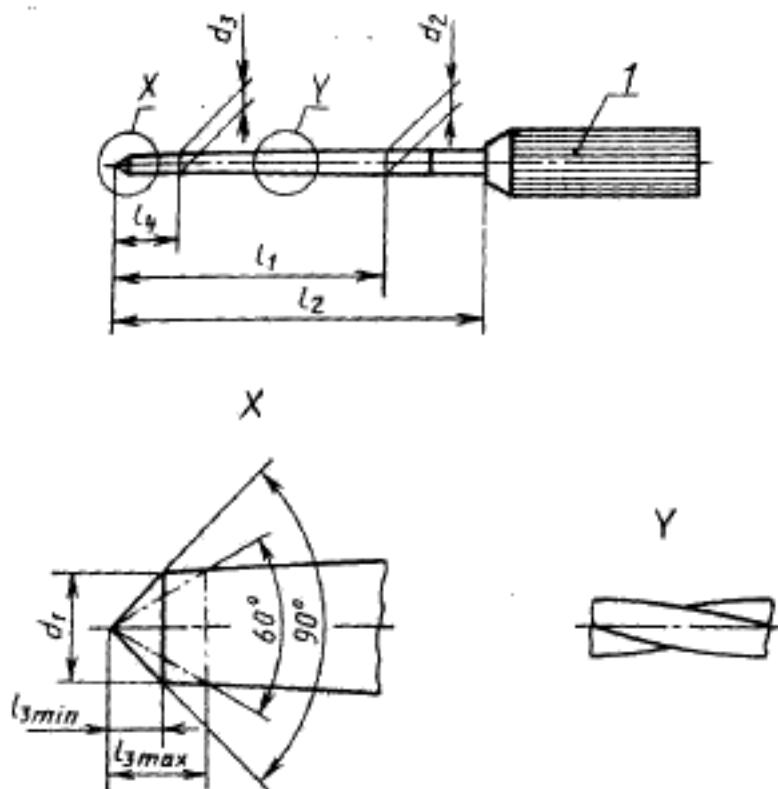

1 — ручка;
 d_1 — начальный диаметр рабочей части; d_2 — максимальный диаметр рабочей части;
 d_3 — диаметр по длине l_3 ; l_1 — длина рабочей части; l_2 — длина оперативной части; l_3 —
длина заходной части; l_4 — длина до точки измерения

Конусность по длине рабочей части 0,02:1

Чертг. 3

Таблица 4*

Размеры, мм


Обозначение номинального размера	$\pm 0,02$	$\pm 0,02$	$\pm 0,02$	l_1 макс	$\pm 0,5$	l_4	Цвето-вый код
008	0,08	0,40	0,14				Серый
010	0,10	0,42	0,16				Фиолетовый
015	0,15	0,47	0,21				Белый
020	0,20	0,52	0,26	16	21;		Желтый
025	0,25	0,57	0,31		25;		Красный
030	0,30	0,62	0,36		28;	3	Голубой
035	0,35	0,67	0,41		31		Зеленый
040	0,40	0,72	0,46				Черный

Продолжение табл. 4*

Обозначение номинального размера	d_1 $\pm 0,02$	d_2 $\pm 0,02$	d_3 $\pm 0,02$	l_1 мм	l_2 $\pm 0,5$	l_3	Цветовой код
045	0,45	0,77	0,51				Белый
050	0,50	0,82	0,56				Желтый
065	0,55	0,87	0,61				Красный
060	0,60	0,92	0,66				Голубой
070	0,70	1,02	0,76				Зеленый
080	0,80	1,12	0,86	16	21;	3	Черный
090	0,90	1,22	0,96		25;		Белый
100	1,00	1,32	1,06		28;		Желтый
110	1,10	1,42	1,16		31		Красный
120	1,20	1,52	1,26				Голубой
130	1,30	1,62	1,36				Зеленый
140	1,40	1,72	1,46				Черный

Примечание. Длины инструментов (l_2), не указанные в таблице, должны иметь допуск $\pm 0,5$ мм от установленного значения.

* См. приложение.

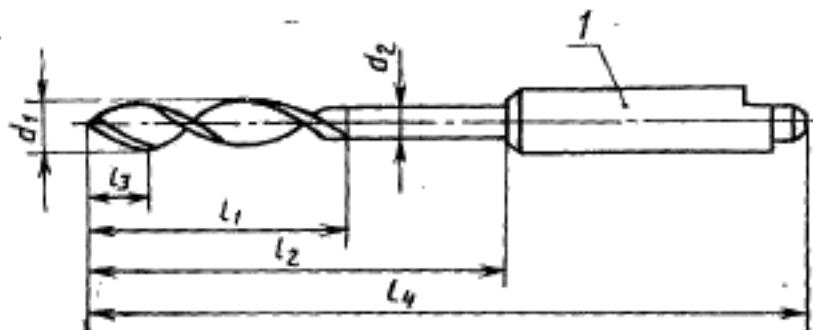

l — хвостовик;
 d_1 — диаметр рабочей части; d_2 — диаметр шейки; l_1 — длина рабочей
 части (цилиндрической); l_2 — длина оперативной части; l_3 — длина
 заходной части; l_4 — общая длина

Таблица 5

Размеры, мм

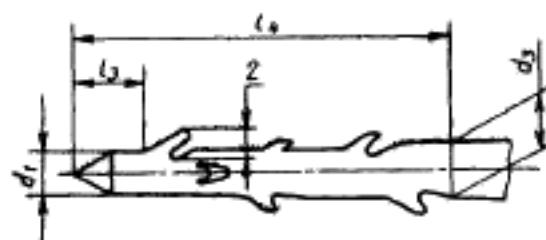
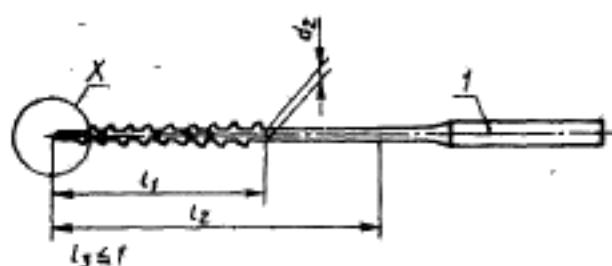
Обозначение комплексного размера	d_1 $\pm 0,01$	d_2 мин.	l_1 макс	l_2 макс	Обозначение	
					Цвет	Кольцевая маркировка
025	0,25	0,15	7,5	0,5	Фиолетовый	—
035	0,35	0,25	8	0,5	Белый	I
045	0,45	0,35	8	0,5	Желтый	II
060	0,60	0,45	8	0,7	Красный	III
075	0,75	0,55	9	0,8	Голубой	III I
090	0,90	0,65	9	1	Зеленый	III II
105	1,05	0,75	10	1,1	Черный	III III

Таблица 5а

Длина l_3 и l_4 для хвостовика

мм

l_2		l_4	
типа 1 $\pm 0,5$	типа 2 мин	типа 1	типа 2
18	25	33	61

 d_1 — начальный диаметр рабочей части; d_2 — диаметр по длине l_2 ; l_1 — длина рабочей части; l_2 — длина оперативной части; l_3 — длина заходной части от остряя до основания первого зубца; l_4 — длина до точки измерения